
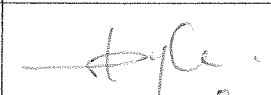
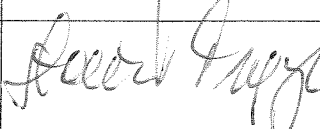
 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE Sp. z o.o.	INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-012/HS	Strona : 1 z 3
		WYDANIE: 1
ISO 9001: 2000	<i>Instrukcja wykonania procesu dezynfekcji przez zanurzenie</i>	DATA OBOWIĄZYWANIA: 2005-10-03


Kopia nr:

Własność:

--	--

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

	<i>STANOWISKO</i>	<i>DATA</i>	<i>NAZWISKO</i>	<i>PODPIS</i>
OPRACOWAŁ	Pielęgniarka Epidemiologiczna	2005.10.03	Anna Danielak	
SPRAWDZIŁ	Naczelny Pielęgniarz	2005.10.03	Wacław Dyk	
ZATWIERDZIŁ	V-ce Prezes Zarządu	2005.10.03	Stanisław Trąpczyński	

 <p>NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE Sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;">INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-012/HS</p>	Strona : 2 z 3
		<p>WYDANIE: 1</p>
<p>ISO 9001: 2000</p>	<p><i>Instrukcja wykonania procesu dezynfekcji przez zanurzenie</i></p>	<p>DATA OBOWIĄZYWANIA: 2005-10-03</p>

1. Przebieg czynności

ŚRODKI MATERIALNE	PRZEBIEG CZYNNOŚCI	UWAGI
<p>Wanna/wiadro z roztworem roboczym środka dezynfekcyjnego Strzykawka</p>	<p>Czynności przed wykonaniem pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać wyboru preparatu i stężenia roztworu roboczego – uwzględniając informacje zawarte w „Planie dezynfekcji” i „Dezynfektariuszu Szpitalnym” <li style="text-align: center;">2. Założyć odzież ochronną <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;"> <p>3. Przygotować roztwór roboczy środka dezynfekcyjnego wg instrukcji (informację jaką instrukcję należy użyć zawiera Dezynfektariusz Szpitalny)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3. Sprawdzić gotowość roztworu używanego wielokrotnie</p> </div> </div> <p>Czynności w trakcie wykonania pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umieścić przedmiot dezynfekcji w pojemniku dezynfekcyjnym 2. Wypełnić kanały i przestrzenie wolne narzędzi/sprzętu medycznego środkiem dezynfekcyjnym za pomocą strzykawki 3. Odczekać wymagany czas <p>Czynności po zakończeniu pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narzędzia/sprzęt medyczny oczyścić zgodnie z zasadami zawartymi w „Procedurze oczyszczania” 2. Wylać środek dezynfekcyjny 3. Wywietrzyć pomieszczenie 4. Pojemnik umyć i zdezynfekować przez przetarcie <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;"> <p>2./5. Zdjąć odzież ochronną</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3./6. Umyć ręce</p> </div> </div> <p>4./7. Udokumentować wykonanie procesu dezynfekcji</p>	

